

保管用

保証書付

CELLTUNE

取扱説明書

CELLTUNE



本製品を正しく安全にお使いいただくためにご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、商品を正しく、安全にお使いください。
- お読みになったら後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。
- 取扱説明書の図と実際の写真が異なる場合がございます。

発売元

伊藤超短波株式会社

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8

TEL 048-254-1028 FAX 048-254-1029

F0a231354-1910 A1911DL

目次

危険

CELLTUNE

取扱説明書


危険	03
安全上のご注意	04
禁忌事項	05
注意事項（電源関連）	07
注意事項（設置）	08
使用上の注意事項	09
ご使用前の確認	10
製品構成	11
各部名称	12
設置	14
肌へのプレテスト	16
操作方法	17
トリートメント方法	19
ご使用後のお手入れ	23
製品保管	24
困ったときは	25
よくあるご質問	26
製品仕様	27
保証規定	28
保証書	29




子供の手の届くところに保管しない。
子供の手の届くところで使用しない。




浴室の中で保管しない。
浴室の中で使用しない。

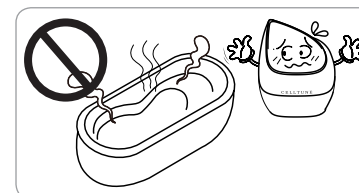

洗面所など、水回りで保管しない。
水回りで使用しない。

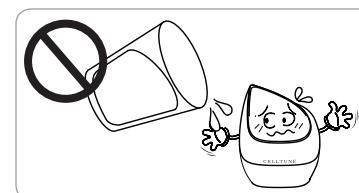

過剰な連続使用はしない。
（業務用としての使用など）
ケガ・発熱などの原因となります。

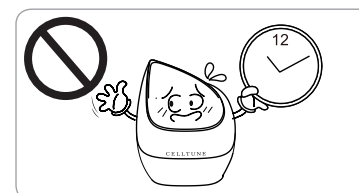

危険

使用中は同じ箇所に当て続けしないでください。
オーバートリートメントはしないでください。

● ケガや火傷の原因になります。




※ 警告


ご家庭での美容以外の目的には使用しないでください。


● 重大な事故やトラブルに繋がる恐れがあります。

- ご使用になる前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いいたします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ず守ってください。

誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を以下の表示で区分し説明しています。

 **危険** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容です。

守っていただく内容を以下の図記号で説明しています。



禁止



注意



必ず守る

危険

医用電気機器の作動に妨害を与える恐れがありますので、併用はしないでください。

- ペースメーカーなどの体内埋込型医用電気機器
- 人口心肺などの生命維持用医用電気機器
- 心電計などの装着型医用電気機器
- その他の医用電気機器

警告

次のような方は使用しないでください。
事故やトラブルの原因になります。

- 急性疾患 ● 結核性疾患 ● 有熱性疾患 ● 血圧異常の方 ● 感染症疾患の方
- アレルギー性疾患の方 ● 原爆傷害の方 ● 特に敏感肌の方
- 医師の治療を受けている方 ● 12歳未満の方 ● 持病をお持ちの方
- 体調が良くない方 ● 皮膚トラブルのある方 ● 酒帯びの方 ● 薬を服用中の方
- 生理中、妊娠中、妊娠の可能性のある方、授乳中の方
- 物理的な刺激などによる病的なシミのある方 ● 歯の治療中の方
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
- 極度な疲労の方、安静が必要な方

※ 通院中の方は医師にご相談のうえでお使いください。

禁忌事項



警告

指定の部位以外や次のような部位には使用しないでください。
事故やトラブルの原因になります。

- 頭部および頭髪 ● 眼球・まぶた ● 耳の周辺 ● 脊髄の真上 ● 肩甲骨の真上
- ひじ・ひざの骨の上 ● のどぼとけ(甲状軟骨の上下左右5 cm以内)
- 心臓の周辺 ● 切り傷がある部位 ● 整形手術をした部位 ● 口内や陰部や粘膜
- にきび ● 日焼けなどで皮膚が炎症を起こしている部位
- 体内に金属やプラスチック・シリコンなどを埋め込んである部位
- 皮膚が化膿し、炎症を起こしている部位 ● バストトップ

※ ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

注意事項（電源関連）



警告



本製品はAC100Vです。
壁面コンセントに直接差し込んでください。
(タコ足配線禁止)
※ 感電・ショート・発火・故障の原因となります。



電源ケーブルを水につけたり、水をかけたり、水洗いをしないでください。
※ 感電・ショート・発火・故障の原因となります。



本体およびコンセント側の電源ケーブルをしっかりと差し込んでください。
コンセントが破損していたり、差し込みが緩い状態ではご使用にならないでください。
※ 感電・火災の原因となります。



電源ケーブルを加工したり、束ねるなど、無理に力を加えないでください。
※ 重いものを乗せたり、挟んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



長時間使用しない場合は電源ケーブルを抜いて保管してください。
※ 感電・漏電・火災の原因となります。



電源ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
※ 感電・ショート・発火・断線の原因となります。



電源ケーブルを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(金属部に触れないようにしてください)。また、濡れた手で抜き差しはしないでください。
※ 感電・ショート・発火の原因となります。



プラグ形状や電圧が合わない場所では、使用しないでください。
※ 感電・ショート・発火・断線の原因となります。

注意事項（設置）



警告



暖房器具や火のそば、炎天下、浴室など高温多湿な場所、可燃性ガス、燃えやすいものの近くに設置しないでください。

※ 動作不良や故障の原因となります。



設置の際に製品に衝撃を与えないでください。

※ 傷害および破損の原因となります。



ホットカーペットの上で使用しないでください。

※ 感電・火災の原因となります。



本体の上にものを置いたり、落下させたりなど、強い衝撃を与えないでください。

※ ケガをしたり、本製品が故障する原因となります。



必ず平らな場所に設置し、布やソファなどの不安定な場所に置いて使用しないでください。

※ 故障の原因となります。



引火性のもの（アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど）の近くに設置しないでください。

※ 火災・感電・ケガの原因となります。



子供の手の届く場所に設置・保管しないでください。

12歳未満の方は使用しないでください。



警告



施術部位に専用クリームを必ず塗布し、お肌に充分なじませてからご使用ください。

※ 火傷の原因となります。



同じ部位に長時間使用しないでください。

※ 火傷やケガの原因となります。
※ 子供の手の届く場所に設置・保管しないでください。



ご使用時のレベル設定は初期設定のレベルよりご使用ください。

※ 高いレベルで使用すると、火傷・鬱血・アザなどの原因となります。



分解、修理、改造しないでください。

※ 火災、感電、故障の原因となります。



異音、焦げ臭いにおい、煙などが出た場合、すぐに電源を切り、販売店にご連絡ください。

※ 火災、感電、故障の原因となります。



専用クリーム以外はご使用にならないでください。

※ 火傷、ケガ、機械故障の原因となります。



美容目的以外で使用しないでください。

※ 火傷、ケガ、機械故障の原因となります。



身体の不自由な人だけの使用はしないでください。未成年の方は保護者同意のうえ保護者の監視の下で使用してください。

※ 火傷、ケガの原因となります。



頭部には絶対に使用しないでください。

※ 火傷、ケガの原因となります。



途中で気分が悪くなったり、お肌に異常が現れた場合、使用を中止してください。

※ 翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

ご使用前の確認


製品構成

ハンドピースフィルター

ご使用前にハンドピースにフィルターが入っていることを確認してください。

また、フィルターに汚れがある場合は、必ず交換してください。

※ ハンドピースフィルターを付けてない、または汚れたフィルターを使い続けると吸引不良や故障の原因になります。

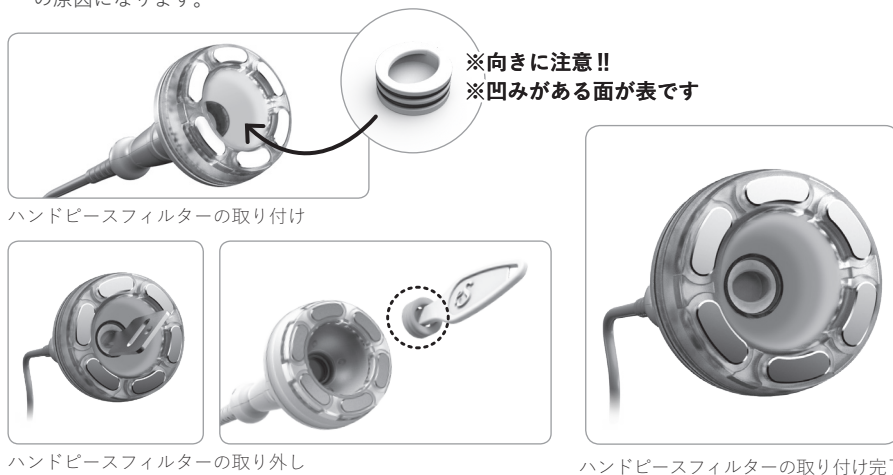

本体フィルター

ご使用前に本体フィルターがしっかりと取り付けられているか確認してください。

また、本体フィルターに汚れがある場合は、必ず新しいものに交換してください。

※ 本体フィルターが汚れたままご使用になりますと、吸引不良や本体故障の原因となります。



警告

フィルターは必ず純正品をお使いください。

本製品の品質や性能・品質向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。



CELLTUNE 本体



ハンドピース



本体フィルター




ハンドピースフィルター




ハンドピース
フィルターリムーバー



ACアダプター

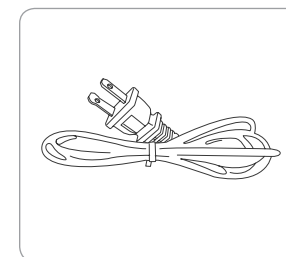


電源ケーブル

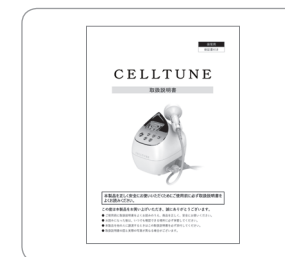

取扱説明書


各部名称

本体

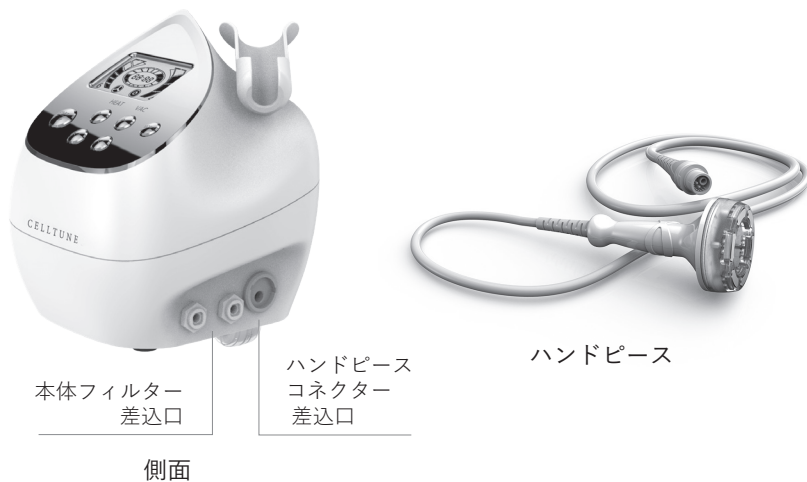

各部名称

操作画面

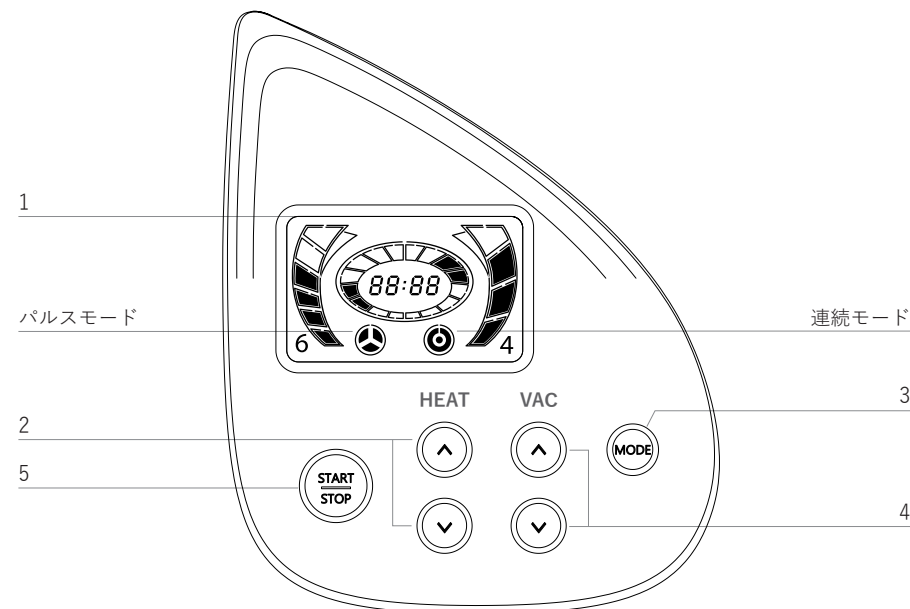

1	液晶モニター	機能設定表示部
2	HEATレベル調節	HEATレベルを調節します
3	吸引モード変更	パルスモードと連続モードの切り替え  パルスモード選択時表示  連続モード選択時表示
4	吸引レベル調節	吸引レベルを調節します
5	START / STOP	動作スタート/ストップ

ハンドピースの取り付けおよび保管

本体側面のハンドピースコネクタ差込口にハンドピースのコネクタをセットします。ハンドピースは本体のハンドピースホルダーにセットし保管してください。




本体フィルターの取り付け方法

本体側面にある本体フィルター差込口に本体フィルターを差し込んでください。本体フィルターの取り付けが緩い場合、吸引圧低下の原因となりますので、しっかりと取り付けてください。



ACアダプター/電源ケーブルの取り付け

- ① ACアダプターと電源ケーブルをセットします。
- ② ACアダプターを本体背面のACアダプター差込口にセットします。
- ③ 電源スイッチを (-) の方向に押すと電源が入ります。

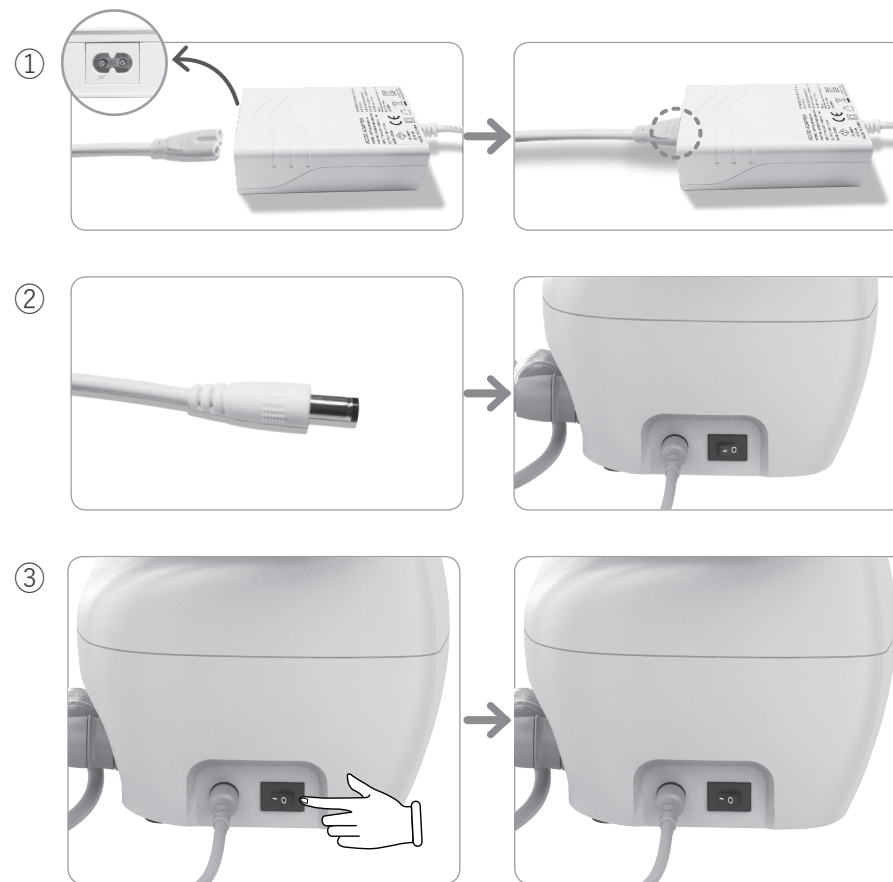

※ 必ず、付属の電源ケーブルとACアダプターをご使用ください。本体故障および発熱・ケガの原因となります。

※ 製品をお使いになる前に必ず行ってください


1. 肌を清潔な状態にします。
2. 腕の内側に専用クリームを塗布します。
HEAT・吸引レベルを電源を入れた直後の設定にし、約3分間製品を使用します。
24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり)を感じなければ使用できます。

! 注意

- ・テスト実施部位に発疹、かゆみ、刺激、赤みなどの異常が生じた場合は直ちにテストを中止し、施術部位を水で洗い流してください。
- ・お肌に異常を感じた場合は使用を中止してください。
- ・翌日まで症状が続く場合は医師にご相談ください。

電源を入れる



本体背面の電源スイッチを入れると液晶モニターが点灯します。

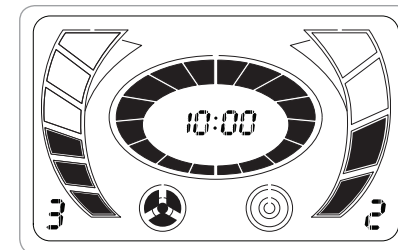

吸引レベル



吸引レベルを設定する(4段階)

※ 始めはレベル2から使用し、1レベルずつ調節してください。

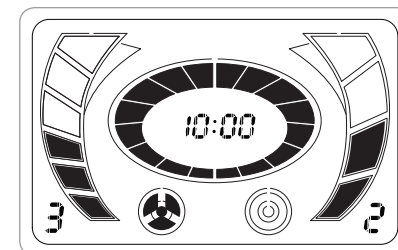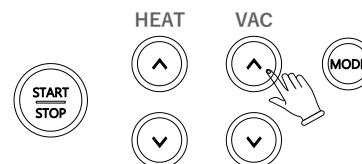

吸引モード

モードボタンで連続モードとパルスモードのどちらかを選択します。

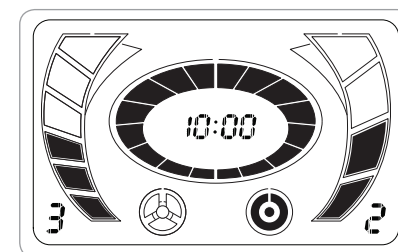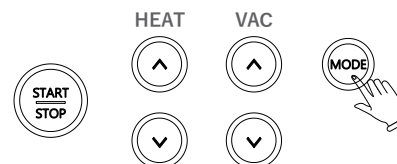

パルスモード



連続モード



操作方法

トリートメント方法

HEATレベル

HEATレベルを設定します(6段階)

※ 始めはレベル3から使用し、1レベルずつ調節してください。

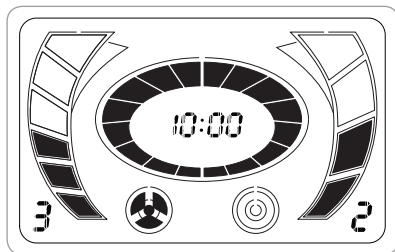
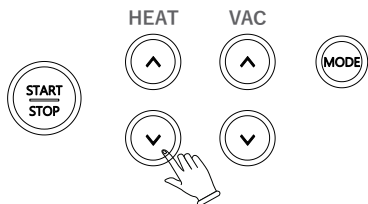


トリートメントスタート

ご使用になれる部位に専用クリームを適量塗布します。

START / STOP を押してトリートメントを始めます。

この時、ハンドピースの赤LEDが点灯します。

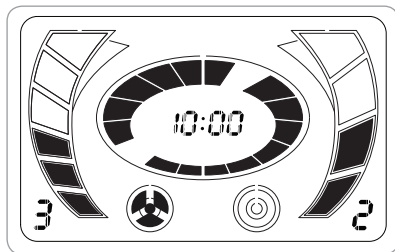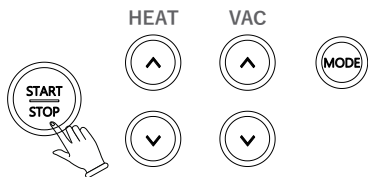

下のガイドラインを参考にご使用ください。


※ ご使用前に必ず専用クリームを塗布し、十分になじませてから使用してください。

※ クリームの使用量が多すぎると詰まりなど、吸引不具合の原因になります。

● フェイシャル

口元からフェイスラインに沿って、ヘッドの施術面が十分に密着できる箇所にご使用ください。

HEAT レベル	吸引レベル	
3	2	2

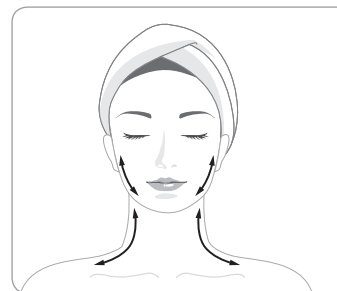


注意

一か所に止めて当て続けしないでください。HEATレベル3、吸引レベル2以上は上げない。




注意

- ヘッドの先端は全面がお肌に密着するようお気を付けてください。
- 専用クリームを塗布していない部位への使用はおやめください。

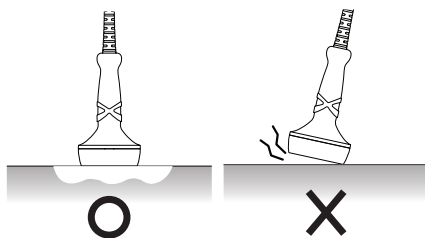

注意

まぶたの上、ヘッドの施術面が十分に密着できない狭い部位、髪の毛、眉毛にまたいで使用しないこと。

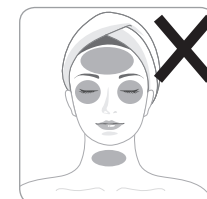

トリートメント方法

下のガイドラインを参考にご使用ください。


※ ご使用前に必ず専用クリームを塗布し、十分になじませてから使用してください。

※ クリームの使用量が多すぎると詰まりなど、吸引不具合の原因になります。

● 肩まわり

肩のラインに沿ってヘッドの施術面が浮かないように十分密着できる箇所にご使用ください。


HEAT レベル	吸引レベル	
		
3	3	3

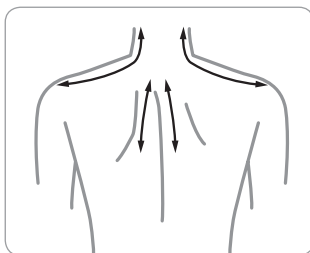

● デコルテ

デコルテラインに沿ってヘッドの施術面が浮かないように十分密着できる箇所にご使用ください。

HEAT レベル	吸引レベル	
		
3	3	3

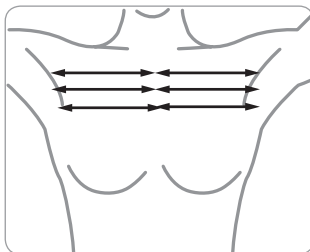


危険

使用中は同じ箇所当て続けしないでください。火傷の原因となります。



注意

脇、骨の上などハンドピースヘッドの全面が密着できない部位へのご使用はおやめください。

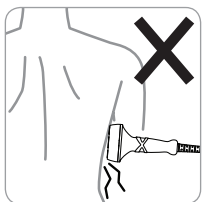

トリートメント方法

下のガイドラインを参考にご使用ください。


※ ご使用前に必ず専用クリームを塗布し、十分になじませてから使用してください。

※ クリームの使用量が多すぎると詰まりなど、吸引不具合の原因になります。

● 二の腕

右の図を参考に腕のラインに沿ってヘッドの施術面が浮かないように十分密着できる箇所にご使用ください。


HEAT レベル	吸引レベル	
		
3	3	3

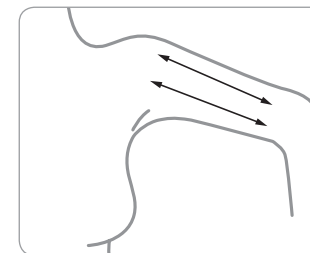

● 腹部


右の図を参考にお腹のラインに沿ってヘッドの施術面が浮かないように十分密着できる箇所にご使用ください。

HEAT レベル	吸引レベル	
		
3	3~4	3~4

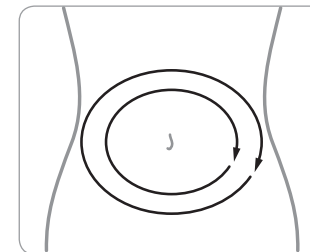

注意

ハンドピースヘッドの全面が密着できない部位や姿勢での使用はおやめください。

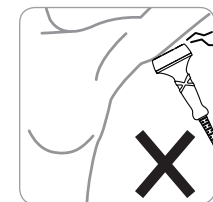

トリートメント方法

下のガイドラインを参考にご使用ください。


※ ご使用前に必ず専用クリームを塗布し、十分になじませてから使用してください。

※ クリームの使用量が多すぎると詰まりなど、吸引不具合の原因になります。

● 太もも

右の図を参考にボディラインに沿ってヘッドの施術面が浮かないように十分密着できる箇所にご使用ください。


HEAT レベル	吸引レベル	
		
3~4	3~4	3~4

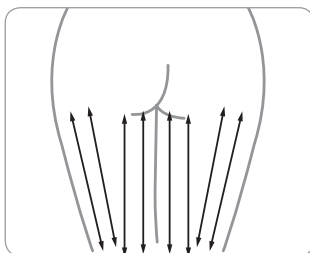

● ふくらはぎ


右の図を参考にボディラインに沿ってヘッドの施術面が浮かないように十分密着できる箇所にご使用ください。

HEAT レベル	吸引レベル	
		
3~4	3~4	3~4

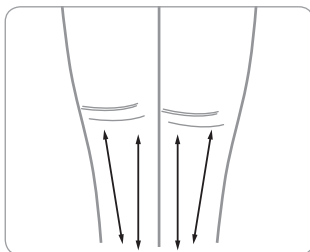

注意

ハンドピースヘッドの全面が密着できない部位や姿勢でのご使用はおやめください。

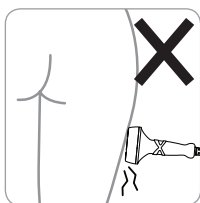

ご使用後のお手入れ

ハンドピース

ご使用后、ハンドピースに付いたクリームや汚れを固く絞った布できれいに拭き取ってください。


※ 汚れを放置されますと、劣化や故障の原因となります。



本体


本体に付いた汚れは固く絞った布できれいに拭き取ってください。

※ 汚れを放置されますと、劣化や故障の原因になります。

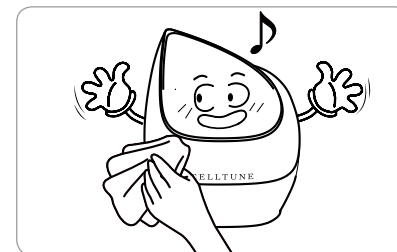

注意

本製品のお手入れには、アルカリ性洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは絶対に使用しないでください。

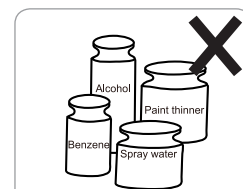

- 保管する前に本体、ハンドピースの汚れをきれいに拭き取ってください。
- 下記の手順に従い、各パーツを取り外してください。
 - ① 電源ケーブル・ACアダプターを取り外します。
 - ② ハンドピースを本体から取り外します。
- ハンドピースと本体は製品ボックスに入れて保管します。
- 製品に衝撃を与えないよう、安全な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使わない場合は、湿気がなく、直射日光が当たらない場所に保管してください。

ご使用前の保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

お問合せ先

本製品に関するご不明な点は、販売店までお問い合わせください。

※ 修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書をご用意ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	電源ケーブルの差し込みの問題	電源ケーブル・ACアダプターを差し込み直してください
温かくならない、感じない	ハンドピースと本体の接続が甘い	ハンドピースが本体にしっかりセットされているか確認してください
	ハンドピース断線故障	販売店にご連絡ください
吸引しない、感じない	ハンドピースと本体の接続が甘い	ハンドピースが本体にしっかりセットされているか確認してください
	ハンドピースフィルターの汚れ、詰まり	新しいフィルターに交換してください
	本体フィルターの緩み、またはセットされていない	本体側面のフィルターをしっかりとセットしてください
	本体フィルターの汚れ、詰まり	新しいフィルターに交換してください
	ハンドピースの詰まり	販売店にご連絡ください

よくあるご質問

製品仕様

Q	A
お風呂で使用できますか？	いいえ、できません。 お風呂や水回りでのご使用は絶対におやめください。
おすすめの使い方はありますか？	リビングの床などしっかりと安定する場所に本体を置き、お腹や太ももなど疲れや体型が気になる部位にあて、動かしながらお使いください。 (ベッドやソファの上に本体を置いてのご使用は絶対におやめください)
敏感肌なのですが使用できますか？	アザになりやすい方、小さい刺激でも赤みが出やすい方は使用しないでください。

製品名	CELLTUNE
定格電源	DC24V/3A
消費電力	120VA
外形寸法	180×196×191 (W×D×Hmm)
重量	2.7Kg

Made in Korea

- 取扱説明書の注意事項に従って使用し、通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします。(消耗品は除く)
 - ※ 修理をご依頼される場合、販売店に製品と保証書をご提示いただき、お申し付けください。
 - ※ 保証期間内でも有償修理となるケースがあります。
 - ※ 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。また保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間内でも次の場合は原則として有償修理となりますのでご注意ください。
 - 取扱説明書の使用上の誤りに起因する故障および損傷。
 - 不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、落下などによる故障や損傷。
 - 一般家庭以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、ご住所の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 車両、船舶などに搭載された場合に生じる故障や損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、異常電圧、指定以外の電源などを使用したことによる故障および損傷。
 - 製造元以外で修理をしたり、改造をしたために生じた故障及び損傷。
- 本保証書は、日本国内のみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - 保証書は、本書に明示した期間、条件において無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は、販売店までお問い合わせください。

お名前	
ご住所	
電話番号	

製品名	CELLTUNE	製造番号	
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より1年間
販売店			

見本

本書は本書記載内容により無償修理を行うことを約束するものです。
上記保証期間内に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

