

保証書
GUARANTEE

●この保証書は、ご購入日から下記期間中に故障が発生した場合に、
本書無償保証規定の内容で無償修理を行うことをお約束するものです。
詳細は無償保証規定(P.26)をお読みください。

商品名：ソニチューン
形式：
製造番号：
ご購入年月日：西暦 年 月 日

お客様名	
ご住所	
お電話	
販売店名	
住所	印
電話	

見本

MADE IN JAPAN

保証期間：ご購入日より1年間

発売元




伊藤超短波株式会社

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8
TEL.048(254)1019 FAX.048(254)1049
(お客様センター)

SONITUNE

User's Manual

家庭用超音波複合美容機器
ソニチューン
取扱説明書

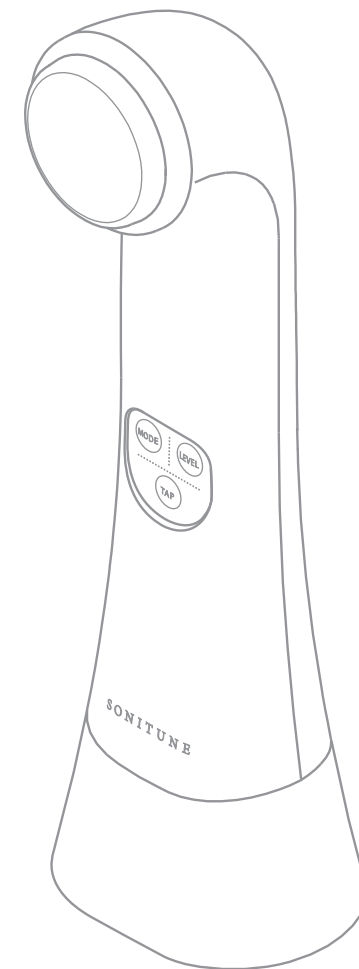

- このたびは、ソニチューンをご購入いただき誠にありがとうございます。
- 使用方法をご理解していただいた上、専用ジェルをご使用ください。
- ご使用前に必ず取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。
その後はいつでも見られるところに大切に保管してください。
- 保証書は「ご購入年月日、販売店名」等の記入を必ずお確かめください。

保証書付

INDEX

■安全上のご注意	3~9
■セット内容	10
■各部の名称	11
■ご使用前に	12~13
■トリートメントの前に	14
・トリートメントの注意	14
■操作の仕方	15~19
・各モードの説明	16
・タッピング機能	16
・通知音	18
・エラー通知	18
・充電電池の残量不足時	19
・電池残量の確認	19
■トリートメントの手順	20~22
■日常の点検・お手入れ・保管	23~26
・トリートメント後には	23
・定期点検のお願い	24
・仕様	25
・アフターサービスについて	25
・無償保証規定	26
■保証書	裏表紙

安全に正しくお使いいただくために

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の方への危険を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした場合に想定される内容を、危険・警告・注意の3つの区分にしています。
- この説明書では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の方への危険を未然に防止するために、本文中に色々な図記号や絵表示を示しています。

	危険	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。
	警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、あるいは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
図記号の例		△記号は、危険・警告・注意を促す内容です。 (左図は、特定しない一般的な危険・警告・注意の通告に使用)
		○記号は、禁止の行為です。 (左図は、特定しない一般的な禁止の通告に使用)
		●記号は、行為を強制する内容です。図の中に具体的な強制や指示の内容が記載されています。 (左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用)

危険

- 次のような人には使用しない。また、自覚症状のある人に対しては、必ず医師と相談した上で使用する。
 - 心臓疾患の人
身体のトラブルのおそれがあります。
- オーバートリートメントはしない。
身体に危害を与えるおそれがあります。
- 下記のような医療機器と併用しない。
 - ペースメーカー等の体内埋込型電気機器
 - 人工心肺等の生命維持用電気機器
 - 心電計等の装着型の医用電気機器
 医療機器の誤作動を招くおそれがあります。



洗面所や浴室などの湿度の高い場所での使用はしない。
濡れた手で、電源プラグの脱着は行わない。
感電のおそれがあります。

警告













次のような人には使用しない。また自覚症状のある人に対しては、必ず医師と相談した上で使用する。











- 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人
- 急性疾患の人 ●皮膚病の人 ●妊娠中の人 ●貧血症の人
- アレルギー反応の起きやすい人 ●悪性腫瘍の人
- 38度以上の有熱性疾患の人 ●感染症疾患の人
- 血圧異常の人(高血圧症の人) ●結核性疾患の人 ●四肢の不自由な人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 低温状態の人 ●血行障害のある人
- しばらく使用しても、効果が現れない人
- 意思表示の出来ない人 ●アレルギー疾患の人 ●血友病疾患の人
- 法定伝染病の人 ●知覚障害の人 ●子供・年少者
- 顔面黒皮病の人や病的なシミのある人 ●薬を服用している人
- 手術後間もない状態、手術部位の傷が十分に癒えていない人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人 ●アトピー性皮膚炎のある人 ●マヒのある人
- 血液循環に問題のある人 ●心臓疾患の人(心筋梗塞、狭心症及びその危険性がある人) ●骨粗鬆症の人 ●月経時の人 ●通院中の人
- アレルギー体質で特に肌が敏感な人 ●安静を必要としている人
- 過度の日焼けで炎症を起こしている人 ●化膿性疾患のある人
- 背骨に異常のある人 ●機器の使用で疼痛が激しくなる人
- 疲労の激しい人 ●引きつけて意識を失う発作性の人
- 出血性疾患の人 ●日焼けをしている人
- 健康(体調)がすぐれない人 ●飲酒をしている人
- 過度に毛細血管がもろい人 ●美容整形手術後3ヶ月以内の人

事故・身体のトラブルのおそれがあります。








 **警告**

-  下記の部位には使用しない。また、自覚症状のある人に対しては、必ず医師と相談した上で使用する。
 - 月経時の腹部 ●整形手術をした部位
 - 目、口(口内を含む)、唇、耳及びその周囲 ●傷口 ●粘膜の部位
 - 肛門、陰部 ●頭部及び頭髮
 - ニキビや吹き出物で炎症を起こしている部位
 - 化粧品などで皮膚炎を起こしている部位
 - 痛覚、知覚障害を起こしている部位
 - 体内に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
 - かゆみやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
 - 動脈怒張、萎縮性疾患を起こしている皮膚面
 事故・身体のトラブルのおそれがあります。
-  機器を修理・分解・改造しない。
火災・やけどのおそれがあります。
-  本来の目的や用途以外には使用しない。
事故・故障のおそれがあります。
-  AC100V以外の電源では使用しない。
火災・感電・故障のおそれがあります。
-  機器の上に水などの入った容器を置かない。
火災・感電・故障のおそれがあります。
-  機器に水をかけたり、水につけたりしない。
火災・感電・故障のおそれがあります。
-  他の機器の部品を流用しない。
やけど・故障のおそれがあります。
-  地震や雷のときは、直ちに使用を中止する。
誤作動による火災・怪我・やけどのおそれがあります。
-  使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。
事故・身体のトラブルのおそれがあります。
-  年少者に操作させない。
事故のおそれがあります。












 **警告**

-  専用のACアダプター以外は使用しない。
火災・故障のおそれがあります。
-  ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用する。
-  取扱説明書は、大切に保管する。
-  揮発性の高いもの(ベンジン・シンナー・除光液など)を機器の近くで使用しない。
爆発・火災のおそれがあります。
-  電源コードについて、次のような取扱いをしない。
 - 傷つけない ●加工しない ●無理に曲げない ●ねじらない
 - 引っ張らない ●加熱しない ●重いものを載せない
 火災・感電のおそれがあります。
-  次のような場所で機器を使用・保管しない。
 - 浴室などの湿気が多い場所 ●ほこりの多い場所
 - 直射日光の当たる場所 ●水などのかかる場所
 - 傾斜、振動、衝撃のある場所 ●屋外
 - 強い電波や磁気の発生する場所 ●年少者の手の届く場所
 - 油煙、湯気の当たる場所
 - 発熱器具(ストーブなど)の近くなど高温になる場所
 - 温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)
 火災・感電・事故・故障・転倒のおそれがあります。
-  機器や電源コードに亀裂などの損傷が生じているときは、使用しない。
火災・感電・事故・怪我のおそれがあります。
-  電源コードの着脱は、プラグ部分を持って確実に行う。
火災・感電・ショートのおそれがあります。
-  濡れた手で機器やコードの取扱いをしない。
感電のおそれがあります。
-  電源プラグは、コンセントへ確実に差し込む。
火災のおそれがあります。















 警告

-  機器に異音や異常が発生したら、直ちに使用を中止し、必ず修理を依頼する。
火災・やけどのおそれがあります。
-  機器を落としたり、破損した場合は、直ちに使用を中止し、電源スイッチを切って電源プラグをコンセントから抜き、必ず修理・点検を依頼する。
火災・感電のおそれがあります。
-  機器に水・異物が入った場合は、直ちに使用を中止し、点検を依頼する。
火災・感電のおそれがあります。
-  ヘッド部を硬いものにぶつけたり、落としたりしない。
怪我・故障のおそれがあります。
-  ヘッド部や本体にヒビまたは傷が入っている場合は使用しない。
肌を傷つけるおそれがあります。
-  ヘッド部を身体の一点に停止、または集中させない。
必ず移動させて使用する。
過照射により、肌トラブルのおそれがあります。
-  専用ゲルを必ず使用する。
肌トラブルのおそれがあります。

 注意


-  タコ足配線をしない。
過熱・火災のおそれがあります。
-  機器を強く押ししたり、叩いたり、尖ったもので突いたりしない。
故障のおそれがあります。
-  ガス漏れに気づいた時は、直ちに使用を中止し、排気してから電源を切る。
火災のおそれがあります。
-  他の電気製品(美容機器など)と併用しない。
誤作動のおそれがあります。
-  コンピューターなどの精密機器や携帯電話・コードレス電話の近くで使用しない。
誤作動のおそれがあります。
-  電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。
火災・感電のおそれがあります。
-  日本国外では使用しない。
事故のおそれがあります。
-  接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人は十分に注意して使用する。
-  幼児や自分で意思表示ができない方への使用は避ける。
事故や体調不良を起こすおそれがあります。
-  美容以外の目的で顔や首周辺部には使用しない。
-  眼球及びまぶたへは使用しない。

 注意

-  機器を移動するときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電、事故のおそれがあります。
-  停電したときは、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電、事故のおそれがあります。
-  機器を手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電・事故のおそれがあります。
-  機器の手入れは、取扱説明書に従う。
事故・故障のおそれがあります。
-  機器を手入れするときは、シンナー・ベンジン・灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉を使用しない。
事故・故障のおそれがあります。
-  機器を高いところから落とすなどの強い衝撃を加えない。
事故・故障のおそれがあります。
-  機器の上には物を置かない。
故障のおそれがあります。
-  機器で遊ばせない。
事故・怪我のおそれがあります。
-  機器の上に乗らない。
怪我・故障のおそれがあります。
-  コード類は、足元の邪魔にならないようにする。
断線のおそれがあります。
-  機器の周辺には可燃物(雑誌・スプレーなど)を置かない。
爆発・火災のおそれがあります。
-  電源コードを発熱器具に近づけない。
火災・感電のおそれがあります。
-  機器の内部へ異物を入れない。
火災・故障のおそれがあります。
-  使用時には身体から金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外す。
やけどのおそれがあります。

注意

- ❗ トリートメントの始めは、必ず出力レベル設定スイッチで低いレベルに調節してから始める。
強いショックを受けるおそれがあります。
- ❗ 身体の異状や肌に湿疹、発赤、かゆみなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止する。
医師に相談して指示に従ってください。
- ❗ 刺激が強すぎないか常に確認し、過度な刺激感があるときは出力を下げる。
肌トラブルのおそれがあります。
- ⊘ ヘッド部に触れたまま他の金属類に触れない。
身体のトラブルのおそれがあります。
- ❗ 出力の上げすぎに注意する。
身体のトラブルのおそれがあります。
- ⊘ 出力したまま放置しない。
感電・やけどのおそれがあります。
- 🔌 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。
火災のおそれがあります。
- ❗ 使用後は、電源スイッチを切って電源プラグをコンセントから抜く。
火災・事故のおそれがあります。
- ⊘ 通電したまま放置しない。
事故・トラブルのおそれがあります。
- ❗ 電源を切るときは、必ず所定の方法を守り、正しく行う。
事故・故障のおそれがあります。
- ❗ 電源プラグとコンセントを定期点検する。
火災・感電のおそれがあります。
- ❗ 機器を廃棄するときは、地方自治体の破棄処理に関する条例または規則に従う。
- ❗ 機器が汚れた場合は、柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は『中性洗剤』を布に含ませ、固く絞り、軽く拭き取ってください。(水洗い禁止)。
故障のおそれがあります。
- ❗ 長期間使用しなかった場合、再使用する前には正常に作動するか点検をする。
事故・故障のおそれがあります。

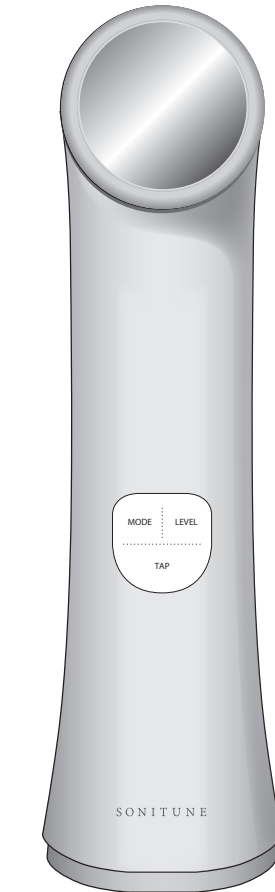


本体



置き台




取扱説明書
(本書)

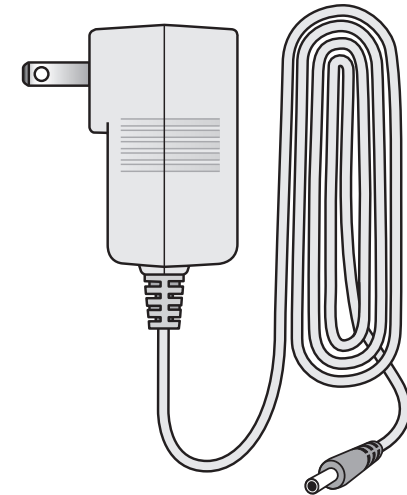


ACアダプター

- お買い求め後は、必ずセット内容をご確認ください。
- 万が一不足・不具合がございましたら販売店にご相談ください。

各部の名称

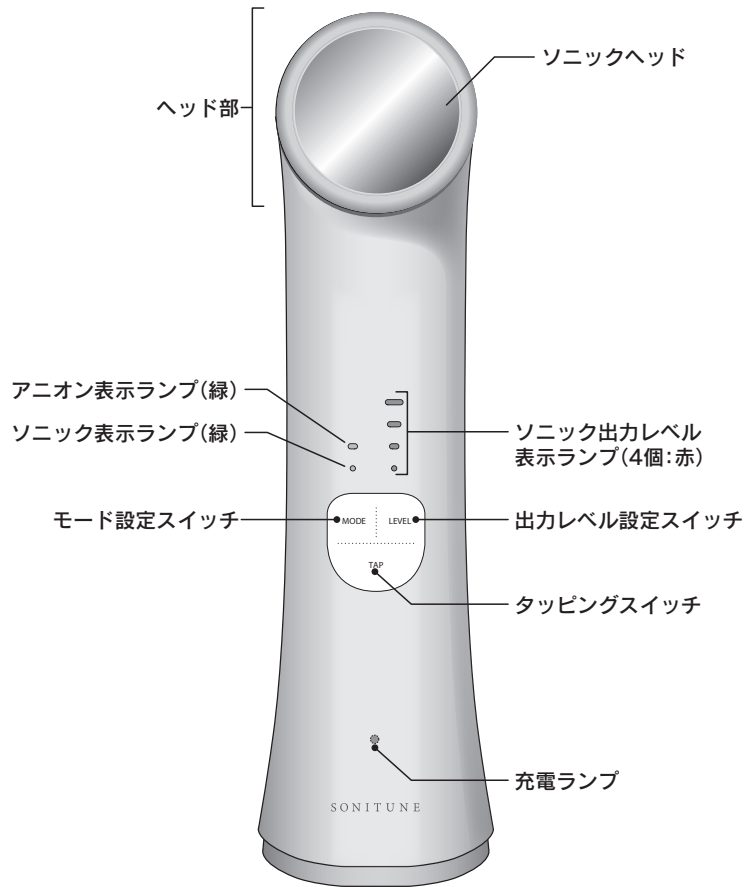


※上図の各表示ランプおよび出力レベル表示ランプ、充電ランプは、点灯時の位置を表示しています。

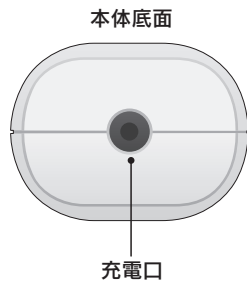


ご使用前に

◆美容機器(本体)を充電してください。

1. 本体を置き台にセットしている場合、置き台から外してください。
2. ACアダプターの電源プラグを家庭用コンセントに差し込んでください。

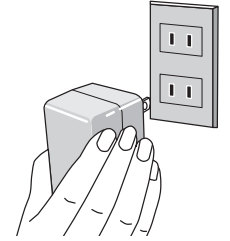

3. ACアダプターのジャックを本体の充電口に接続してください。

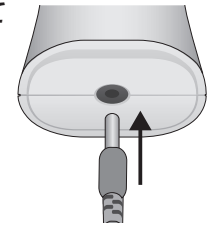

4. 充電が開始されると、本体正面の充電ランプが点灯します。



5. 充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

※充電時間はおおよそ3時間です(周囲の気温や充電電池の状態により変動します)。



濡れた手でのご操作は、感電する可能性があり非常に危険です。絶対におやめください。

- 充電電池の寿命を保つため、充電電池の残量表示が1つになってから充電することをおすすめします。※残量確認の方法については、P.19を参照ください。
- 充電中に本体が熱くなりますが、故障ではありません。
- ACアダプターを接続したまま使用することができます。
- ACアダプターを接続したまま使用すると、充電が行われません。充電を行う際には、電源をOFFにしてください。
- 充電電池は取り外しできません。充電電池の交換は、ご購入の販売店か、発売元にご依頼ください。


ご使用の前に

本体を縦置きする場合は、必ず置き台をご使用ください。本体のみ縦置きした場合、転倒して破損するおそれがあります。

◆置き台のセット

本器の充電を行う際などに、置き台にセットすることができます。


1. 置き台にセットしながら充電をする場合、コードを本体の充電口に接続してください。
2. 置き台後部の溝にコードを通します(①)。
3. 置き台に本体を取り付けます。
置き台の左右どちらかの溝に本体の位置を合わせてから(②)、もう片方の溝に押し込んでください(③)。

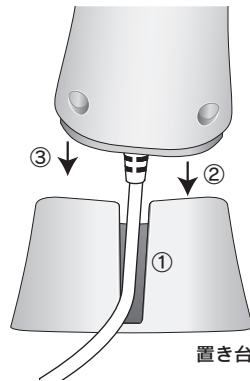

トリートメントの前に

◇洗顔などであらかじめメイクや汚れを落としてください。

◇身につけているアクセサリーや時計・貴金属類は外してください。

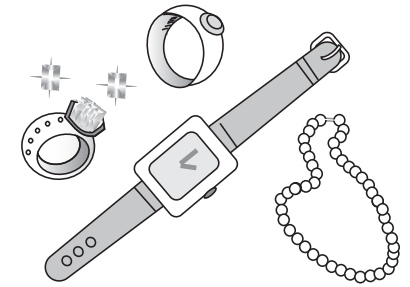

指輪 時計 ネックレス など

■トリートメントの注意

1. お肌のトリートメントは1日1回(約10分)までが適度です。
 - 過度なトリートメントはお肌のトラブルの原因になる可能性があります。
 - 連続使用や、気温の高い環境でのご使用などによって本体が高温になった場合、保護機能が働き、全ての表示ランプが点滅するとともに「ピー」という通知音が鳴った後に電源が自動でOFFになります。
(通知音はP.18参照)
2. トリートメントは洗顔後に行ってください。
3. お肌の状態は、体調によっても異なります。
 - お肌の様子を見ながらご使用ください。
湿疹、かゆみなどお肌に何らかの異常が生じた場合、使用を中止して専門医にご相談ください。
 - お肌のトラブルはストレス、体質、内臓疾患、また、化粧品なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。

※必ず使用前にトリートメント部位に専用ゲルを塗布してください。


操作の仕方

- 初めてご使用になる前に必ず充電を行ってください。
(充電の仕方はP.12参照)
- 本器使用中に本体が熱くなることがありますが、これは比較的大きな電流を使用するためであり、本体の異常ではありません。
- 使用前に必ずトリートメント部位に専用ゲルを塗布してください。

1. 電源を入れる

モード設定スイッチを押して電源を入れると、「ソニック+アニオン」モード、ソニック出力「強」が選択された状態で自動的に出力が開始されます。


また、ソニック表示ランプ、アニオン表示ランプ、出力レベル表示ランプ(4個)が点灯します。

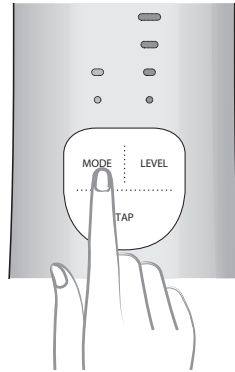

2. モード設定

モード設定スイッチを押すと、次のようにモードが切り替わります。

電源OFF
↑
ソニックのみ
↑
ソニック+アニオン
↑
電源ON

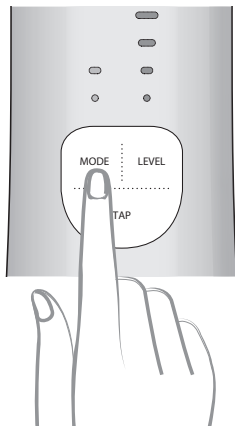

※トリートメントの途中でモードを変更するとタイマーはリセットされます。

操作の仕方

■各モードの説明


ソニック+アニオン

ソニック(超音波)とアニオン(負電荷)を同時に出力するモードです。



ソニック



ソニック(超音波)のみを出力するモードです。

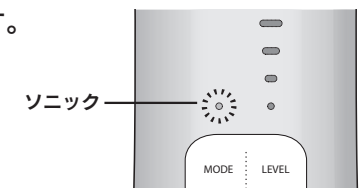

■タッピング機能

タッピングスイッチを押すとヘッド部が振動します。

- タッピング機能のみで使用する場合は、開始から10分が経過するか、再度タッピングスイッチを押すと停止します。
- タッピング機能は、「ソニック+アニオン」モード、または「ソニック」モードと同時に使用することもできます。
同時使用時のタイマー設定は以下のとおりとなります。

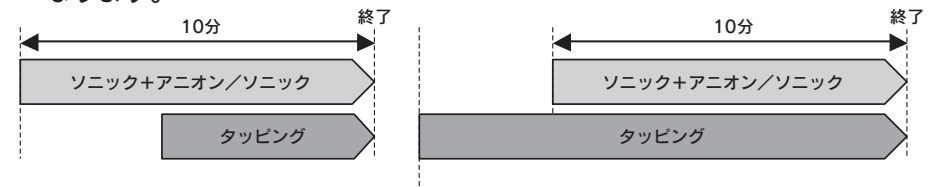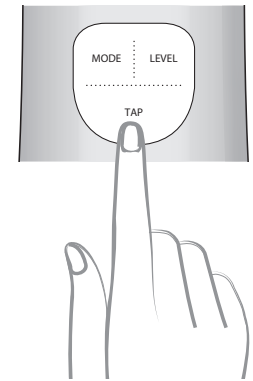

- ソニック(超音波):1秒間に300万回のマイクロ振動がお肌に働きかけます。
- アニオン(負電荷):マイナス電子が角質層をトリートメントします。
- タッピング:音波振動が心地よくお肌に働きかけます。

操作の仕方

3. 出力レベル設定

出力レベル設定スイッチを押すと、次のようにソニックの出力レベルが切り替わります。


強 (出力レベル表示ランプ4個点灯)



弱 (出力レベル表示ランプ2個点灯)

※トリートメント中にモードを切り替えると、出力は「強」に戻ります。

※アニオンの出力は調節できません。

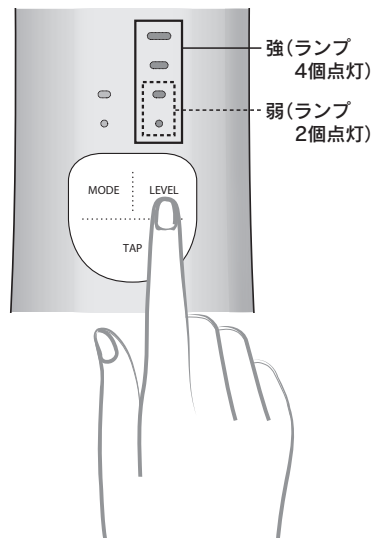


4. 電源を切る

出力開始(電源ON)から10分が経過すると、自動的に電源が切れます。

トリートメントの途中でも、モード設定スイッチを電源OFFになるまで押すことで電源を切ることができます。(P.15参照)

※電源をOFFにすると、タッピング機能も同時に停止します。

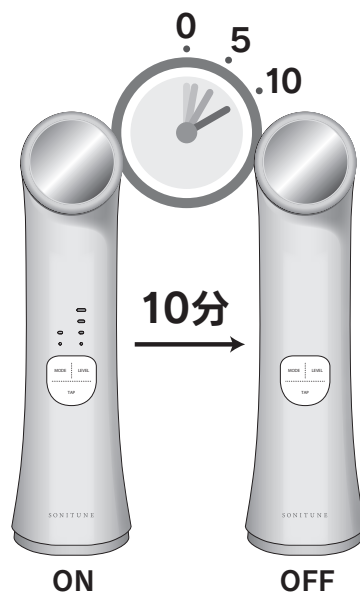

操作の仕方

■ 通知音

以下のタイミングでそれぞれ通知音が鳴ります。

出力中(タッピング中)に10秒ごと	ピッ
出力開始から5分経過	ピッピッ
出力開始から10分経過	ピー (電源がOFFになります)
充電電池の残量不足時	「ピッピッピッピッピッ」×5回・ピー (電源がOFFになります)

■ エラー通知

エラーが発生した場合、ランプ表示と通知音でお知らせします。

●ソニックヘッドが高温になったとき

ランプ表示:ソニック出力レベル表示ランプが消灯し、ソニック表示ランプが点滅

通知音:「ピッピッピッピッピッ」×3回・ピー(電源がOFFになります)
→ソニックヘッドの温度が下がるまで待ってからご使用ください。

●アニオンが正常に出力されていないとき

ランプ表示:ソニック出力レベル表示ランプが消灯し、アニオン表示ランプが点滅

通知音:「ピッピッピッピッピッ」×3回・ピー(電源がOFFになります)
→電源を入れ直してください。繰り返し発生する場合は、お求めの販売店または発売元にご連絡ください。

●本体が高温になったとき

ランプ表示:全ての表示ランプが点滅

通知音:「ピッピッピッピッピッ」×5回・ピー(電源がOFFになります)
→本体の温度が下がるまで待ってからご使用ください。

操作の仕方

■ 充電電池の残量不足時

充電電池が残量不足になると、通知音が鳴った後に電源がOFFになります。

(1)「ソニック+アニオン」モードまたは「ソニック」モードを使用中の場合

ランプ表示:ソニック出力レベル表示ランプが5回点滅

通知音:「ピッピッピッピッピッ」×5回・ピー(電源がOFFになります)

(2)タッピング機能のみを使用中の場合

ランプ表示:ランプ表示なし


通知音:「ピッピッピッピッピッ」×5回・ピー(電源がOFFになります)

■ 電池残量の確認

電源OFFの状態ですべてのランプを長押しすることで、電池残量を確認できます。電池残量に応じて、出力レベル表示ランプが右図のとおり5回点滅します。


※充電中は、電池残量の確認はできません。

LED	電池残量目安
4つ	75%以上
3つ	50~75%
2つ	25~50%
1つ	25%以下

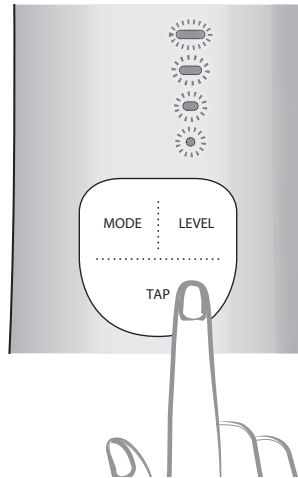

トリートメントの手順

下記の手順にそってトリートメントを行ってください。

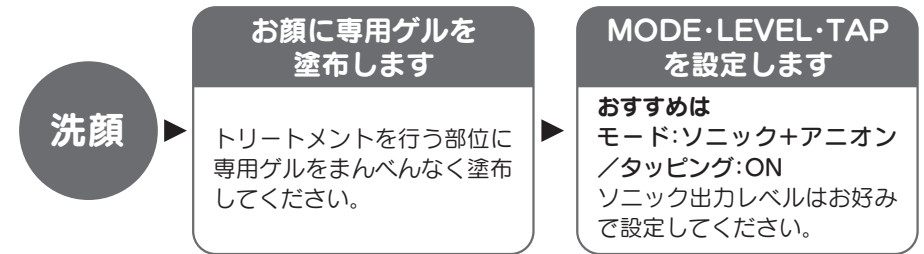


ソニックヘッドの当て方



上図のように、本体の背部に手のひらが当たるように本体を握り、ソニックヘッド全体がお肌にしっかりと密着するように当ててください。

ソニックヘッドの動かし方

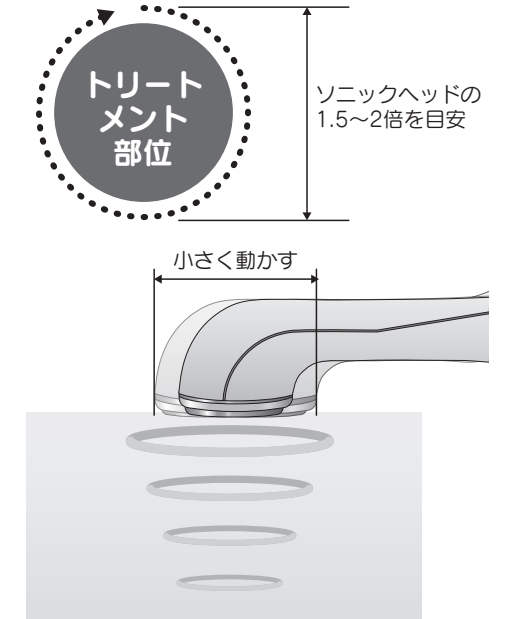

ソニックヘッドの1.5~2倍の大きさの円を描くように小さく動かします。1秒で1回円を描く程度のスピードが目安です。

トリートメントの手順


◆フェイストリートメント〈10分目安〉 ※左右合わせて10分

下図の●の位置でヘッドをクルクルと動かしながら、10秒ずつ当ててください。
※10秒ごとに「ピツ」と鳴るお知らせ音を目安にしてください。

①あご下:1ポイント 2回




②あご～耳の前:4ポイント 2回ずつ

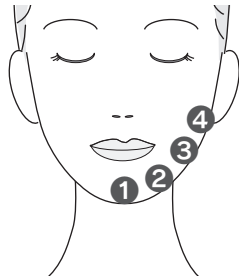


③小鼻～耳の前:2ポイント 2回ずつ




④目の下:1ポイント/
こめかみ:1ポイント 2回ずつ

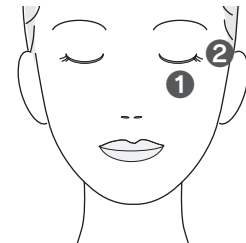

⑤眉間:1ポイント/額:3ポイント
2回ずつ

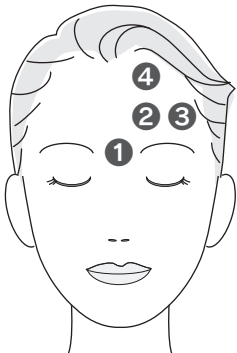

⑥鼻下:1ポイント/鼻:1ポイント
2回ずつ

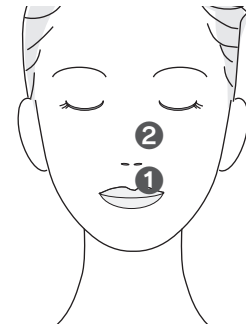

トリートメントの手順

◆ネックトリートメント〈5分目安〉 ※左右合わせて5分

下図の●の位置でヘッドをクルクルと動かしながら、10秒ずつ当ててください。
※10秒ごとに「ピツ」と鳴るお知らせ音を目安にしてください。

①鎖骨下内～外:3ポイント 2回ずつ



②首筋外側ライン下～上:2ポイント/
首筋内側ライン下～上:2ポイント
2回ずつ



眼球部分、上まぶた、喉もとけ周辺にはご使用にならないで
ください。

■トリートメント後には…

1.お肌に触れるヘッド部に付着した専用ゲルの残り・汚れはきれいに拭き取ってください。

- 本器のお手入れは、柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい時は『中性洗剤』を布に含ませ、固く絞り、軽く拭き取ってください。(水洗い禁止)
また、お手入れの際は、ベンジン・シンナー・アルコール等の溶剤を使わないでください。
- 溶剤を使うと外装ケースが変形したり、塗装がはがれる恐れがあります。
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。



■ベンジン・シンナー・アルコール等の溶剤、熱湯の使用や水洗いはしないでください。故障、外装ケースの変形、塗装の剥離の原因となります。

2.電源プラグとコンセントの点検

電源プラグとコンセントのほこり等は定期的に取り除いてください。



- 電源プラグとコンセントの定期点検をしてください。火災や発火のおそれがあります。
- 電源プラグとコンセントのほこり等は定期的に取り除いてください。絶縁不良による火災の原因となります。

3.保管する時

- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 湿気やほこりの少ない場所に保管してください。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所は避けてください。
- 長期間使用しなかった機器をご使用いただく時には、取扱説明書のとおり操作を行い、正常に作動することを確認してください。

次のような場所には保管しないでください。



- 高温多湿の場所
 - ほこりの多い場所
 - 油煙や湯気の当たる所
 - 直射日光が当たる所
- 故障、火災、感電等の原因となります。

■定期点検のお願い

■ご使用中のソニチューンの点検のお願い

- こんな症状はありませんか？
- ・ACアダプターが異常に熱い
 - ・煙が出たり、異常な臭いや音がする
 - ・水や異物が入った
 - ・その他の異常や故障がある

このような症状の時は故障や事故防止のため、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店もしくは発売元に点検をご依頼ください。

■仕様

商 品 名	ソニチューン		
電 源	ACアダプター	入力電圧:100V~240V	出力電圧:DC5V 2A
消 費 電 力	7W	重 量	約220g
超音波周波数	3MHz	寸 法	208×60×62mm
超 音 波 出 力	弱:0.6W 強:1.3W	ヘッド部材質	ステンレス合金
負 電 荷 出 力	-150V	生 産 国	日本

■アフターサービスについて

●保証書について

保証書に必ず『ご購入年月日・販売店名』等の記入があることをご確認の上、内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

機器本体及び付属品の保証期間は、ご購入日より1年間とします。

●補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、修理をご依頼ください。

●故障した場合の連絡について

故障した場合は、ご購入の販売店または発売元にご連絡いただき、修理をご依頼ください。

●保証期間経過後の修理について

ご購入の販売店または発売元にご相談ください。

修理によって商品の機能が維持できる場合、ご希望により有償修理させていただきます。その際の送料は往復ともお客様のご負担になります。

修理後、宅配便にて、販売店またはお客様にご返送いたします。

●修理をお受けになる場合の注意

ご購入の販売店、または発売元に修理を依頼された場合、お見積もり後、修理を依頼された販売店またはお客様へご連絡し、ご了解を得た後修理いたします。

修理しない場合も送料はお客様のご負担になります。

●修理等についてのお問い合わせ

発売元 伊藤超短波株式会社 お客様センター
TEL.048(254)1019 FAX.048(254)1049

■無償保証規定

- 1.本保証書は、日本国内で使用される場合に限りです。
- 2.お客様名、ご購入年月日、販売店名のない場合は無効となります。
- 3.修理ご依頼の場合は、ご購入の商品と保証書を発売元にお送りください。
- 4.修理時の発送費用はお客様の実費負担となります。
- 5.保証期間中でも次の場合は原則として有償修理になります。
 - 取扱説明書以外の上記の使用上の誤りに起因する故障及び損傷
 - 不当な修理や改造による故障や損傷
 - ご購入後の輸送・投棄・落下などによる故障や損傷
 - 保証書の提示がない場合
 - 保証書にご購入年月日・販売店名・お客様名のご記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 車両、船舶に搭載された場合に生じる故障や損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障や損傷
 - 誤った修理をしたり、消耗品の交換をしたり、改造で生じた故障や損傷
- 6.本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
- 7.本保証書は、本書に明示した期間・条件をもとにして無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明な点は、ご購入の販売店または発売元までお問い合わせください。
※保証期間外及び保証適用外の故障でも実費にて修理いたします。