



なりたい自分が
ここから生まれる

毎日の生活の中で、気になるのは日々のコンディション

すっきりしたい 快適でいたい 美しくいたい

自分がより自分らしくいるために、時間をもっと贅沢に使う

そう決めた日から心もカラダもかろやかに変化し始めた

進化するボディ 輝き出す表情

[ツインビートR]
Twin Beat

メーカー希望小売価格 231,000円(税抜210,000円)

主な仕様

●定格入力電源	DC12V(付属の充電ACアダプター(入力AC100V)) DC7.4V(リチウムイオン充電電池)
●定格消費電力	約15W(最大出力時)
●搬送周波数	5000 Hz(max)
●本体サイズ	縦 174 × 横 85 × 厚さ 32(mm)
●本体重量	約310g(リチウムイオン充電電池含む)
●出力レベル	1～90 レベル*
●タイマー	トレーニングコース：15/30分 リラクスクース：15/30分 ケアコース：12時間(固定) ビューティーコース：10分(固定)

*ケアコースは0～500(μA)、また、ビューティーコースは0～50(レベル/μA)



すべての付属品を
収納可能

標準付属品

- ① 本体 1本
- ② 接続コード(1.15m・黒) 1本
- ③ 接続コード(1.15m・灰) 1本
- ④ 充電ACアダプター 1個
- ⑤ アクセルガード(L・50 × 90mm・4枚) 1袋
- ⑥ アクセルガード(M・50 × 50mm・4枚) 1袋
- ⑦ クレードル 1台
- ⑧ R導子 1個
- ⑨ Rジェル 1本

*リチウムイオン充電電池(工場出荷時:本体にセット済み)
*取扱説明書



危険

下記のような医用電気機器との併用は、誤作動をまねく恐れがありますので使用しないでください。

- 1) ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- 2) 人工心臓等の生命維持用医用電気機器
- 3) 心電計などの装着形医用電気機器



ITO Sports Project

物理療法機器メーカーのバイオニアとして、アスリートの活躍を応援しています。



イトスポーツプロジェクト 検索

<https://ito-sports-project.com/>



伊藤超短波は常に信頼と共にあります。

1916年創業の伊藤超短波は、物理療法のバイオニアとして、常に進歩と革新に挑戦し続けています。

国際規格 ISO 認証取得

医療機器品質マネジメントシステム …………… ISO 13485

環境マネジメントシステム …………… ISO 14001(弊社筑波工場のみ取得)

お問い合わせは

発売元

伊藤超短波株式会社

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8
TEL.048-254-1019(お客様センター)
<https://www.itolator.co.jp/>

注) このカタログに掲載の記事、写真の無断転載を禁じます。全ての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。デザイン、仕様は改善のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

E0c000819-2305 G2306DL

本カタログの記載内容は、2023年6月現在のものです。

[ツインビートR]
Twin Beat

心地よく叶える、理想のボディ



プロの現場で活躍する 本格機能を搭載！

ツインビートRの大きな特長は、コンパクトなボディでありながらプロ仕様の高度な機能が搭載されていることです。トレーニングに、癒やしに、筋肉のケアに。さらにお顔のビューティー機能も備えた小さな実力派。この一台でトレーニングからフェイシャルケアまで、快適で美しい毎日をサポートします。

気分で選べる4コース



トレーニング

EMS

5000Hzの4極干渉波で深層筋をトレーニング

5000Hzの4極干渉波のEMSを搭載。より深く、より広い筋肉層に働きかけることで筋肉をトレーニングします。



ケア

MCR

12時間連続使用で筋肉をトリートメント

微弱電流を使用することで、運動後の筋肉をトリートメントします。MCRは刺激が少なく、寝ながら使用可能です。



リラックス

TENS

部位ごとに合わせたプログラム

おなかや腰には5000Hzの4極干渉波、肩、ふくらはぎ、足裏には2極断続を使用し、身体全体をリズムカルに刺激します。




ビューティー

EMS/TENS/MCR

ツインビート史上初EMSでフェイシャルケア


イトー業務用EMSのノウハウを活かし、EMSで表情筋をトリートメントする機能を搭載しました。心地よい刺激でフェイスラインをすっきりさせます。

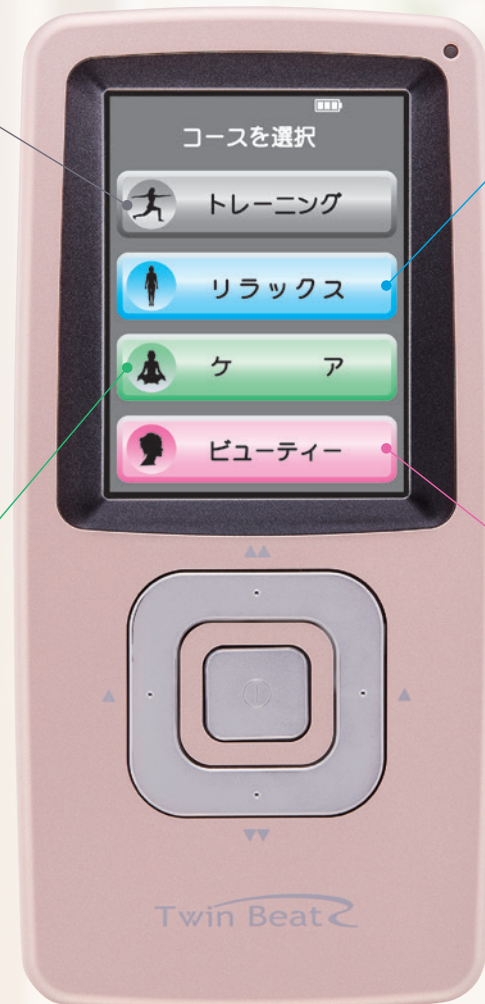

トレーニング/EMS

家事やお仕事の合間に

筋肉の深層部まで届く5000Hzの干渉波のEMSでしっかりとインナートレーニング！おなか、ウエスト、せなか、ヒップは4極干渉波で、バスト、うで、太ももは2極断続で刺激することで、効率的な筋肉トレーニングが可能です。くつろぎながら理想のボディラインへ！

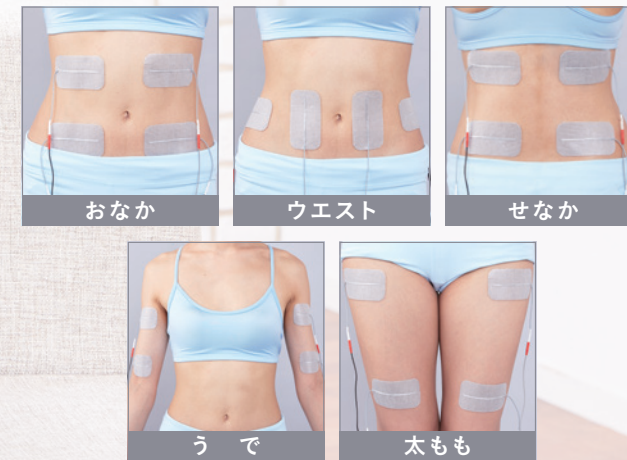

リラックス/TENS

おやすみ前にゆったりと

リズムカルな刺激で、身体全体を心地よくリフレッシュさせる効果があります。おなかや腰には5000Hzの4極干渉波、肩やふくらはぎ、足裏には2極断続で部位ごとに働きかけます。おなかモードには骨盤周りの筋肉をストレッチする「サイクロン刺激」というエステサロンのようなメニューも！



ケア/MCR

寝ながら安心ケア

トップアスリートも使用しているマイクロカレント機能で運動後の筋肉をやさしくトリートメントします。刺激の少ない微弱な電流が、肩、腰、足首などを心地よくケア。12時間連続使用が可能で、寝ながら安心して筋肉をリフレッシュさせることができます。



ビューティー

フェイスアップ EMS パッティング TENS トリートメント MCR

毎日のお手入れタイムに

フェイシャルケア専用設計されたR導子を使用し、心地よいEMSの刺激を表情筋に届けます。EMSで顔の筋肉をトレーニングする「フェイスアップ」、TENSでリフレッシュさせる「パッティング」、MCRでお肌や筋肉を整える「トリートメント」の3つの機能で、本格的なフェイシャルケアが可能になりました。

